



Thermo Plate[®]

TP シリーズ

顕微鏡観察時の温度管理を、より正確により確実に行えます。
生物系などさまざまな分野における温度管理をサポートします。



高いユーザーコンフォートの追求 *Thermo Plate*[®]

顕微鏡観察時の温度管理がより正確に、
より確実に行えます。

生物系など様々な分野における
温度管理のあらゆるニーズにお応えし、
豊富なラインアップでサポートいたします。



Stylish & Smart

Which is your color ? More accurate, More stable !

人・環境に優しいフォルムを追求

高機能・高性能はもちろんのこと、実験室に優しく安らいだ雰囲気をもたらすため、温もりと親しみのあるデザインを採用。

顕微鏡用ガラスヒーター温度調節器

High Quality & High Performance



コントローラ寸法: W104mm × D137mm × H116mm

ガラスヒーター部

硬質ガラスを特殊加工した透明発熱体です。位相差、微分干渉、偏光顕微鏡での観察にも対応できます。また、プレート表面がフラットなため、顕微鏡操作および検体の移動が容易に行えます。

明るい環境づくりを意図したカラーバリエーション※



イエロー:-Y

ピンク:-P

白:-無

グリーン:-G

バイオレット:-V

型式の末尾にコントローラの色を判別する記号が付きます。
※ガラスヒーター・レンズヒーター・チューブヒーターのみにあります。

イメージング用 温度設定: 室温～50℃

ライブセルイメージングでの
油浸・水浸等の高倍率での撮影

タイムラプス観察などのイメージングには、ピントのズレが大敵。
特に高倍率観察や油浸・水浸観察時に独自の連続出力制御方式により
フォーカスドリフトを最小限に抑えます。

■温度センサー、専用ソフト TEM 付属



コントローラ寸法: W98mm × D145mm × H117mm
※イメージング用のコントローラは白色となります。

加温冷却 温度設定: 4℃～60℃

酵母・植物、海洋生物、培養細胞、線虫、
プラナリアなどの観察

電子冷却素子の応用と、独自の制御系により、コンパクトで応答性
に優れた簡易冷却・加温システムです。

室温付近の温度管理が可能。詳しくは P13 をご参照下さい。

■温度センサー、専用ソフト TEM には対応していません。



コントローラ寸法: W160mm × D260mm × H180mm

Smart1 簡単温度測定機能

付属の滅菌対応のセンサーを用いて、実際の検体温度の測定や、プレート表面温度の補正が可能です。

ヒーター温度 ⇄ センサー温度
【画面移動キー】




Smart2 温度管理ソフト TEM

センサーで測定した検体温度の表示・記録をすることができます。サンプリングデータは CSV 形式で出力も可能。補正機能もございます。




Smart3 安定したピント、高倍率観察に対応

従来の PID 制御に加え連続出力制御方式の採用により、ON/OFF で出力を制御する方式に比べフォーカスドリフトを最小限に抑えます。特に高倍率観察時に効果を発揮します。

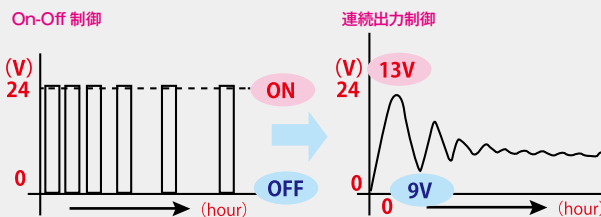

正確な温度管理を可能にした
ガラスヒーター

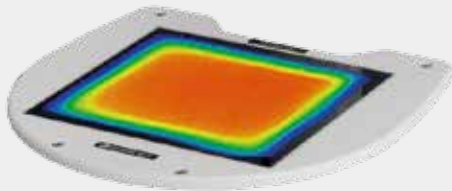

サーモカメラによる温度分布画像。

高温 温度設定：室温～100℃

材料等の物性変化の観察

透明ガラスヒーターを採用し
各種顕微鏡に対応。

■温度センサー、専用ソフト TEM には
対応しておりません。



コントローラ寸法：W120mm × D250mm × H158mm

ノイズレス 温度設定：室温～50℃

ライフサイエンス分野での電位測定時の検体の温度管理

直流電源仕様：膜電位測定時の検体の温度管理
コントローラ

シールド機構を組み込むことによりノイズを軽減した温度精度が±0.1℃の高精度タイプ。直流電源の供給量を自動制御しながら連続的に供給するので、高精度な温度制御が可能です。

■温度センサー、専用ソフト TEM 付属

プレート

【倒立顕微鏡用】 外枠は特殊素材で高い断熱性を実現。さらに、プレート表面全面がアースと接続されるため、プレート表面からのノイズの発生を最小限に抑えます。

■主な用途／パッチクランプ、マニピュレータ操作を必要とする細胞工学、神経科学、遺伝子工学などの分野での電位測定時の検体の温度管理。

【正立顕微鏡用】 ■主な用途／細胞電位、膜電位測定時の検体の温度管理。



コントローラ寸法：W98mm × D145mm × H117mm
※ノイズレスのコントローラは白色となります。

※ノイズレスタイプにおけるノイズレベル：0.244pA 以下（1KHz フィルター使用時）自然科学研究機構測定値

OLYMPUS

倒立顕微鏡用
正立顕微鏡用
実体顕微鏡用

OLYMPUS

Nikon

倒立顕微鏡用
正立顕微鏡用
実体顕微鏡用

Nikon

ZEISS

倒立顕微鏡用
正立顕微鏡用
実体顕微鏡用

ZEISS

KEYENCE

倒立顕微鏡用

KEYENCE

Leica

倒立顕微鏡用
正立顕微鏡用
実体顕微鏡用

Leica

その他

ユニバーサルタイプ
大型タイプ
ホットプレート
レンズヒーター
チューブヒーター
温度計
加温冷却
特注実例

その他



適応顕微鏡機種

IX83/73

IX81/71/51

IX70/50

IMT2

中座タイプステージ

開口部φ110mm

適応顕微鏡機種


IX83/73

XY 手動ステージ
(IX3-SVR)


XY 電動ステージ
(IX3-SSU)

(サブステージ
開口部 156mm×190mm用)

スタンダード

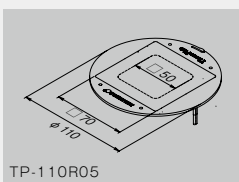

TP-110R05

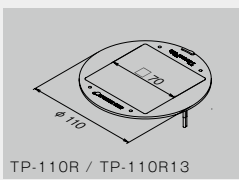


TP-110R13 (白枠)

TP-110R / TP-110R13

温度設定	ガラス厚	型式
ガラスプレート 室温 ~ 50℃	0.5mm	TP-110R05
	1.0mm	TP-110R
	1.3mm	TP-110R13

※ガラスボトムディッシュ内の標本を
レリーフコントラスト観察するのに最適


高温

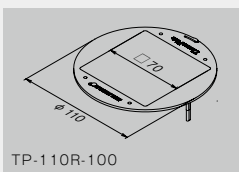

TP-110R-100

温度設定	ガラス厚	型式
ガラスプレート 室温 ~ 100℃	1.0mm	TP-110R-100



ノイズレス

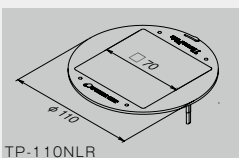


TP-110NLR

温度設定	ガラス厚	型式
ガラスプレート 室温 ~ 50℃	1.0mm	TP-110NLR

スタンダード

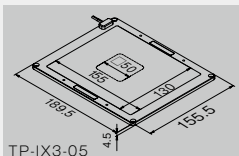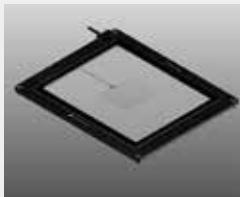


TP-IX3-05

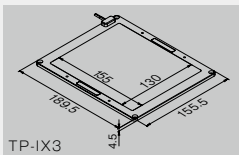

TP-IX3

温度設定	ガラス厚	型式
ガラスプレート 室温 ~ 50℃	0.5mm	TP-IX3-05
	1.0mm	TP-IX3


イメージング

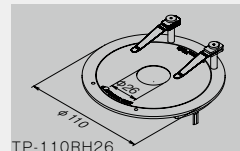

TP-110RH26

温度設定	型式
金属穴あきプレート 室温 ~ 50℃	TP-110RH26


加温冷却

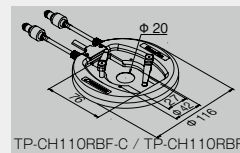

TP-CH110RBF / TP-CH110RBF

温度設定	型式
金属穴あきプレート 4℃ ~ 60℃	TP-CH110RBF-C(専用チラー付) TP-CH110RBF(保冷ボックス付)


加温冷却

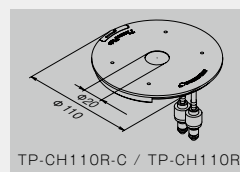

TP-CH110R-C / TP-CH110R

温度設定	型式
金属穴あきプレート 4℃ ~ 60℃	TP-CH110R-C(専用チラー付) TP-CH110R(保冷ボックス付)

イメージング

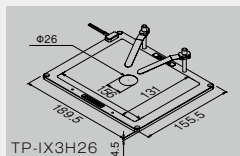

TP-IX3H26

温度設定	型式
金属穴あきプレート 室温 ~ 50℃	TP-IX3H26



製品をお選びになる際、ご注意ください。※プレートのガラス厚について

■ガラス厚 0.5mm 表記のものはプレート中央 50x50mm 部分のガラス厚は 0.5mm、周辺は 1.0mm です。

■ガラス厚 1.0mm 表記のものは全面が 1.0mm になります。■ガラス厚 1.3mm 表記のものは全面が 1.3mm になります。





適応顕微鏡機種

IX シリーズ

XY 電動ステージ


開口部 110mm × 160mm

スタンダード

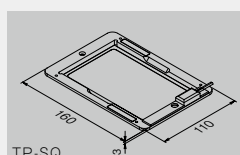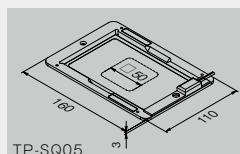


温度設定	ガラス厚	型式
ガラスプレート 室温 ~ 50℃	0.5mm	TP-SQ05
	1.0mm	TP-SQ

イメージング

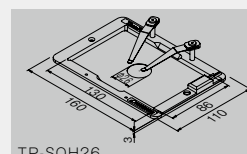

温度設定	型式
金属穴あきプレート 室温 ~ 50℃	TP-SQH26

加温冷却

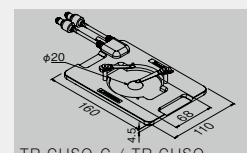



温度設定	型式
金属穴あきプレート 4℃ ~ 60℃	TP-CHSQ-C(専用チラー付) TP-CHSQ(保冷ボックス付)

適応顕微鏡機種

IX シリーズ


Prior XY 電動ステージ
H117

スタンダード

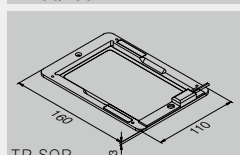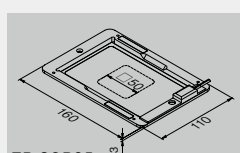

温度設定	ガラス厚	型式
ガラスプレート 室温 ~ 50℃	0.5mm	TP-SQP05
	1.0mm	TP-SQP

イメージング

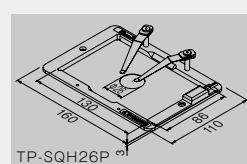



温度設定	型式
金属穴あきプレート 室温 ~ 50℃	TP-SQH26P

適応顕微鏡機種

CKX41/31 CK40/30/2



XY メカニカルステージ

スタンダード

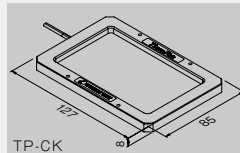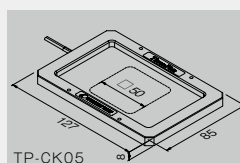

温度設定	ガラス厚	型式
ガラスプレート 室温 ~ 50℃	0.5mm	TP-CK05
	1.0mm	TP-CK

スタンダード

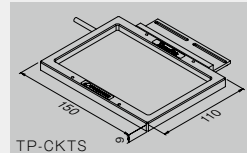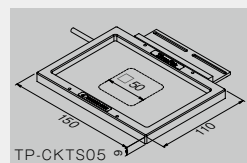

温度設定	ガラス厚	型式
ガラスプレート 室温 ~ 50℃	0.5mm	TP-CKTS05
	1.0mm	TP-CKTS




適応顕微鏡機種

POWER BX/BX
(U-SVLO/SVRO/SVLB-4/SVRB-4)


BH2
CX40
CH40/30

スタンダード

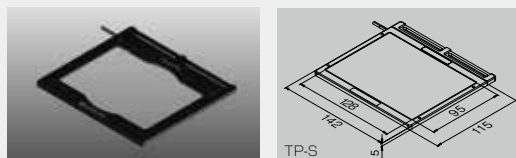


温度設定	ガラス厚	型式
ガラスプレート 室温 ~ 50℃	1.0mm	TP-S

高温

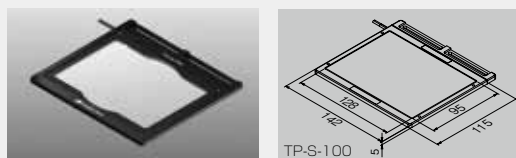


温度設定	ガラス厚	型式
ガラスプレート 室温 ~ 100℃	1.0mm	TP-S-100

加温冷却

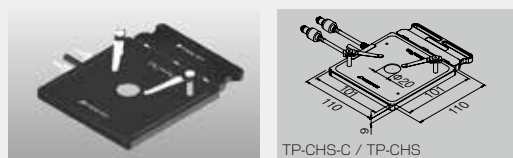

温度設定	型式
金属穴あきプレート 4℃ ~ 60℃	TP-CHS-C (専用チラー付) TP-CHS (保冷ボックス付)

ノイズレス

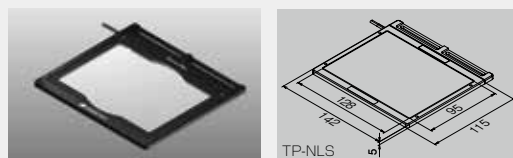


温度設定	ガラス厚	型式
ガラスプレート 室温 ~ 50℃	1.0mm	TP-NLS



適応顕微鏡機種


MVX10
SZX16/SZX10
(SZX2-ILLB, SZX2-ILLK, SZX2-ILLD)

スタンダード

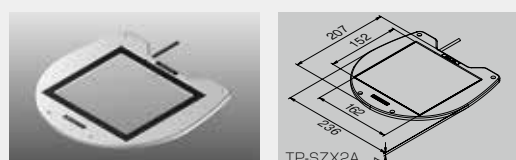


温度設定	ガラス厚	型式
ガラスプレート 室温 ~ 50℃	1.0mm	TP-SZX2A

スタンダード

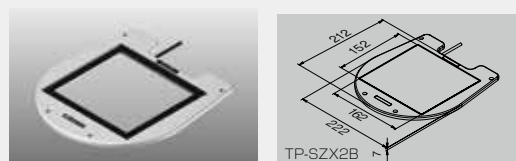


温度設定	ガラス厚	型式
ガラスプレート 室温 ~ 50℃	1.0mm	TP-SZX2B

スタンダード

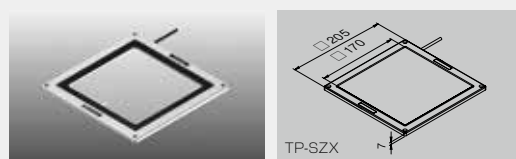

温度設定	ガラス厚	型式
ガラスプレート 室温 ~ 50℃	1.0mm	TP-SZX

スタンダード

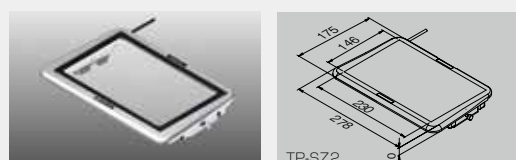

温度設定	ガラス厚	型式
ガラスプレート 室温 ~ 50℃	1.0mm	TP-SZ2

スタンダード




温度設定	ガラス厚	型式
ガラスプレート 室温 ~ 50℃	1.0mm	TP-OZ

適応顕微鏡機種


SZX16/SZX10
(SZX2-ILLT)

スタンダード

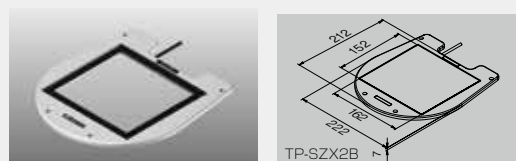


温度設定	ガラス厚	型式
ガラスプレート 室温 ~ 50℃	1.0mm	TP-SZX2B

スタンダード

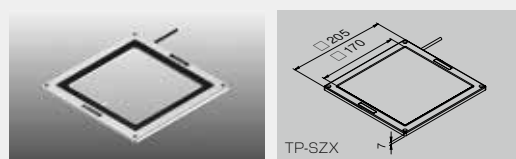

温度設定	ガラス厚	型式
ガラスプレート 室温 ~ 50℃	1.0mm	TP-SZX

スタンダード

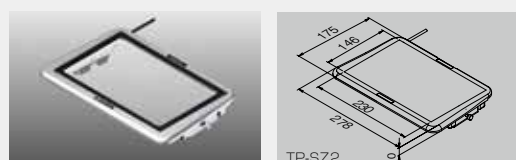

温度設定	ガラス厚	型式
ガラスプレート 室温 ~ 50℃	1.0mm	TP-SZ2

スタンダード




温度設定	ガラス厚	型式
ガラスプレート 室温 ~ 50℃	1.0mm	TP-OZ

適応顕微鏡機種


MVX10
SZX12/9/7
(SZX-ILLK, SZX-ILLB2, SZX-ILLD2)

スタンダード

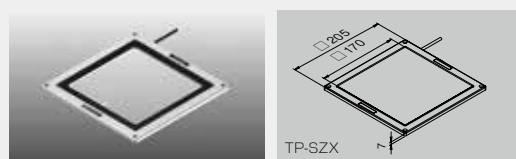

温度設定	ガラス厚	型式
ガラスプレート 室温 ~ 50℃	1.0mm	TP-SZX

スタンダード

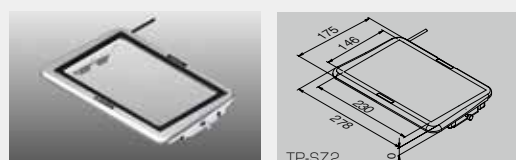

温度設定	ガラス厚	型式
ガラスプレート 室温 ~ 50℃	1.0mm	TP-SZ2

スタンダード




温度設定	ガラス厚	型式
ガラスプレート 室温 ~ 50℃	1.0mm	TP-OZ

適応顕微鏡機種

SZX7/SZ61
(SZ2-ST+SZ2-ILA)

スタンダード

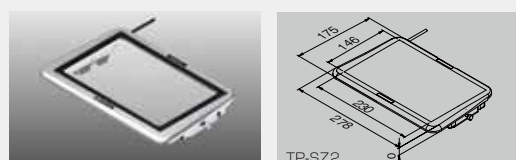

温度設定	ガラス厚	型式
ガラスプレート 室温 ~ 50℃	1.0mm	TP-SZ2

スタンダード



温度設定	ガラス厚	型式
ガラスプレート 室温 ~ 50℃	1.0mm	TP-OZ

適応顕微鏡機種

SZ60/40/11

加温冷却の詳細は
P13をご参照ください。



専用チラーユニット

温度コントローラー

加温冷却プレート

加温冷却



温度設定	型式
金属穴あきプレート 4℃ ~ 60℃	TP-CHS-C (専用チラー付) TP-CHS (保冷ボックス付)





適応顕微鏡機種

Ti
TE2000/300/200
TMD300/200

蛇の目タイプステージ


開口部φ 108mm

スタンダード

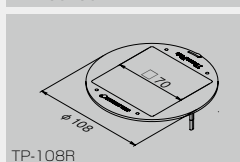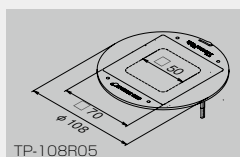


温度設定	ガラス厚	型式
ガラスプレート 室温～50℃	0.5mm	TP-108R05
	1.0mm	TP-108R

高温

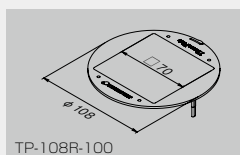


温度設定	ガラス厚	型式
ガラスプレート 室温～100℃	1.0mm	TP-108R-100

ノイズレス

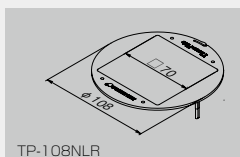


温度設定	型式
ガラスプレート 室温～50℃	TP-108NLR

イメージング

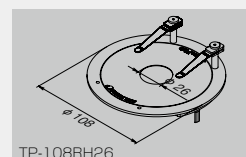


温度設定	型式
金属穴あきプレート 室温～50℃	TP-108RH26

加温冷却

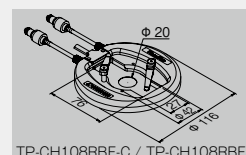

温度設定	型式
金属穴あきプレート 4℃～60℃	TP-CH108RBF-C(専用チラー付) TP-CH108RBF(保冷ボックス付)

加温冷却

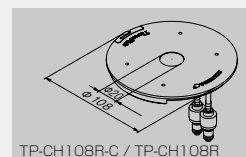



温度設定	型式
金属穴あきプレート 4℃～60℃	TP-CH108R-C(専用チラー付) TP-CH108R(保冷ボックス付)

適応顕微鏡機種

Ti
専用XY電動ステージ


※ピエゾ非装着の場合は、別途ステージアダプター TID-NA が必要になります。

スタンダード

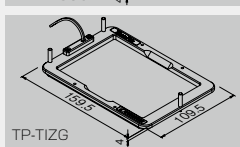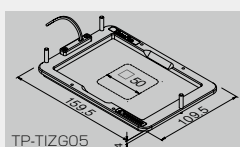

温度設定	ガラス厚	型式
ガラスプレート 室温～50℃	0.5mm	TP-TIZG05
	1.0mm	TP-TIZG

イメージング

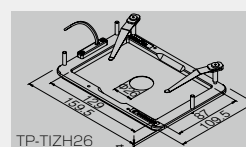

温度設定	型式
金属穴あきプレート 室温～50℃	TP-TIZH26






適応顕微鏡機種

TS100/TS100-F

メカニカルステージ

スタンダード

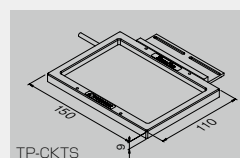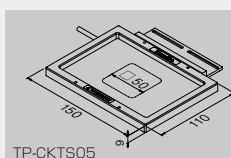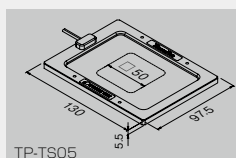



	温度設定	ガラス厚	型式
ガラスプレート	室温 ~ 50℃	0.5mm	TP-TS05
			TP-CKTS05
		1.0mm	TP-CKTS

適応顕微鏡機種

TMS/TMS-F

メカニカルステージ

スタンダード

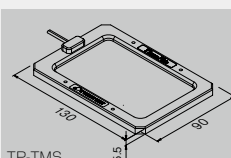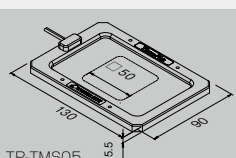


	温度設定	ガラス厚	型式
ガラスプレート	室温 ~ 50℃	0.5mm	TP-TMS05
		1.0mm	TP-TMS



適応顕微鏡機種


Ni Ci 90i/80i/55i/50i E1000/800/600 E400/200 OPTIPHOT-2 LABOPHOT-2

スタンダード

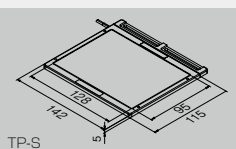


	温度設定	ガラス厚	型式
ガラスプレート	室温 ~ 50℃	1.0mm	TP-S

高温

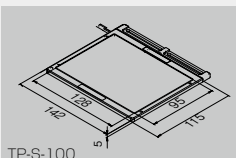


	温度設定	ガラス厚	型式
ガラスプレート	室温 ~ 100℃	1.0mm	TP-S-100

加温冷却

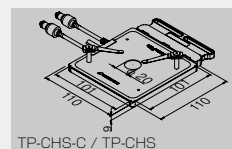

温度設定	型式
金属穴あきプレート 4℃ ~ 60℃	TP-CHS-C (専用チラー付) TP-CHS (保冷ボックス付)

ノイズレス


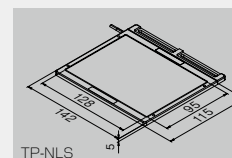


温度設定	ガラス厚	型式
ガラスプレート 室温 ~ 50℃	1.0mm	TP-NLS

適応顕微鏡機種

AZ100M/AZ100

スタンダード

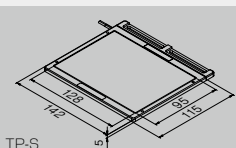
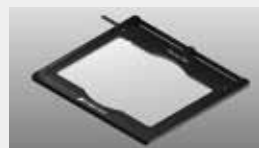


	温度設定	ガラス厚	型式
ガラスプレート	室温 ~ 50℃	1.0mm	TP-S

適応顕微鏡機種

FN1 ITS-FN1-Stage (ナリシゲ社製)

スタンダード

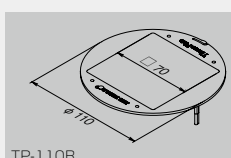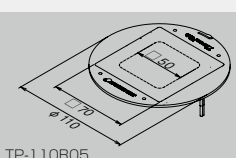

	温度設定	ガラス厚	型式
ガラスプレート	室温 ~ 50℃	0.5mm	TP-110R05
		1.0mm	TP-110R

※ FN-3PS2 三枚板左ハンドルステージご使用の場合はお問い合わせください。

Nikon



適応顕微鏡機種


SMZ1500

SMZ1000

SMZ800



スタンダード

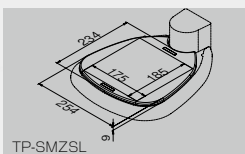


TP-SMZSL

温度設定	ガラス厚	型式
ガラスプレート	室温 ~ 50℃	1.0mm TP-SMZSL

照明スタンド: C-DSD, C-DSS, C-BD

スタンダード

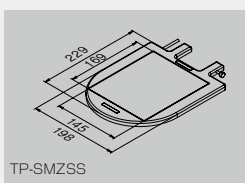


TP-SMZSS

温度設定	ガラス厚	型式
ガラスプレート	室温 ~ 50℃	1.0mm TP-SMZSS

照明スタンド: C-PS, C-DS


スタンダード

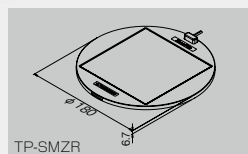

TP-SMZR

温度設定	ガラス厚	型式
ガラスプレート	室温 ~ 50℃	1.0mm TP-SMZR

加温冷却

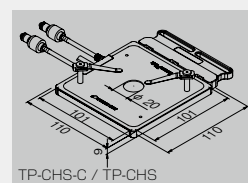

TP-CHS-C / TP-CHS

温度設定	型式
金属穴あきプレート	4℃ ~ 60℃
	TP-CHS-C (専用チラー付)
	TP-CHS (保冷ボックス付)

適応顕微鏡機種

SMZ-U1/U2/U3/U4


SMZ-10A-3/10A-5

SMZ660/645

SMZ-2T/2B


SMZ1/1B

スタンダード

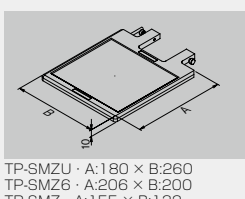TP-SMZU
TP-SMZ6
TP-SMZ

温度設定	ガラス厚	型式
ガラスプレート	室温 ~ 50℃	1.0mm TP-SMZU
		TP-SMZ6
		TP-SMZ

加温冷却

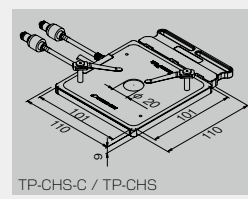

TP-CHS-C / TP-CHS

温度設定	型式
金属穴あきプレート	4℃ ~ 60℃
	TP-CHS-C (専用チラー付)
	TP-CHS (保冷ボックス付)

OLYMPUS

Nikon
実体

ZEISS

KEYENCE

Leica

その他

ZEISS



適応顕微鏡機種


Axio Observer

Axiovert シリーズ

(試料ホルダー K 型用)





イメージング

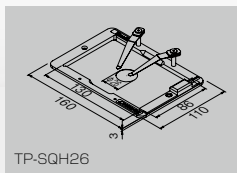


TP-SQH26

温度設定	型式
金属穴あきプレート 室温 ~ 50℃	TP-SQH26

スタンダード

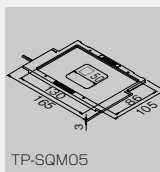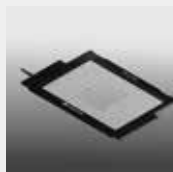


TP-SQM05

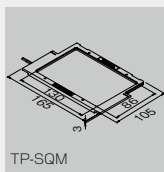


TP-SQM

温度設定	ガラス厚	型式
ガラスプレート 室温 ~ 50℃	0.5mm	TP-SQM05
	1.0mm	TP-SQM

スタンダード

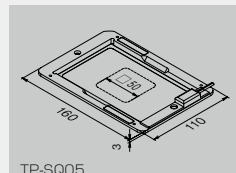


TP-SQ05

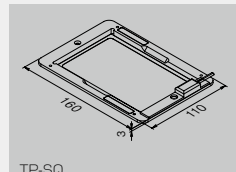

TP-SQ

温度設定	ガラス厚	型式
ガラスプレート 室温 ~ 50℃	0.5mm	TP-SQ05
	1.0mm	TP-SQ


加温冷却

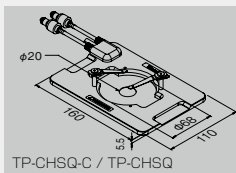

TP-CHSQ-C / TP-CHSQ

温度設定	型式
金属穴あきプレート 4℃ ~ 60℃	TP-CHSQ-C (専用チラー付) TP-CHSQ (保冷ボックス付)

加温冷却

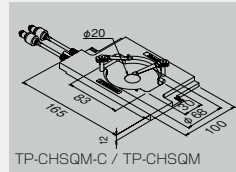

TP-CHSQM-C / TP-CHSQM

温度設定	型式
金属穴あきプレート 4℃ ~ 60℃	TP-CHSQM-C (専用チラー付) TP-CHSQM (保冷ボックス付)

適応顕微鏡機種

Axio Observer

Axiovert シリーズ

(試料ホルダー M 型用)

KEYENCE


適応顕微鏡機種

BZ-8000

BZ-9000




スタンダード

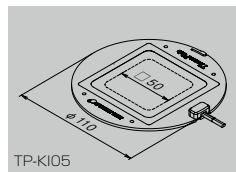

TP-KI05

温度設定	ガラス厚	型式
ガラスプレート 室温 ~ 50℃	0.5mm	TP-KI05


加温冷却

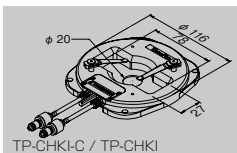

TP-CHKI-C / TP-CHKI

温度設定	型式
金属穴あきプレート 4℃ ~ 60℃	TP-CHKI-C (専用チラー付) TP-CHKI (保冷ボックス付)

イメージング

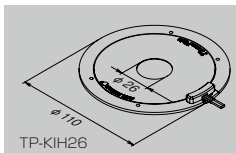

TP-KIH26



温度設定	型式
金属穴あきプレート 室温 ~ 50℃	TP-KIH26



適応顕微鏡機種


Axio Examiner
Axio Imager
Axiophot2
Axioplan2
Axioskop
Axiolab
Axiolab Pol
Axiolab Imager

スタンダード

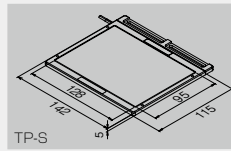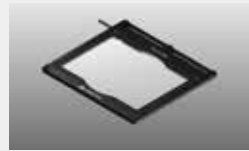


温度設定	ガラス厚	型式
ガラスプレート 室温 ~ 50℃	1.0mm	TP-S

加温冷却

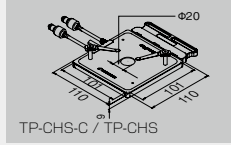



温度設定	型式
金属穴あきプレート 4℃ ~ 60℃	TP-CHS-C (専用チラー付) TP-CHS (保冷ボックス付)

高温

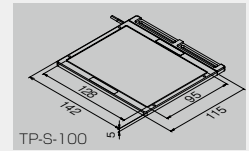

温度設定	ガラス厚	型式
ガラスプレート 室温 ~ 100℃	1.0mm	TP-S-100

ノイズレス

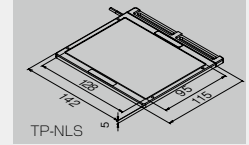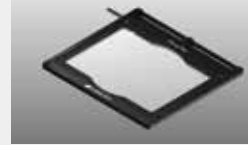


温度設定	ガラス厚	型式
ガラスプレート 室温 ~ 50℃	1.0mm	TP-NLS



適応顕微鏡機種

SteREO Discovery
Stemi 2000
 (スタンド N:495052 9801 用)


スタンダード

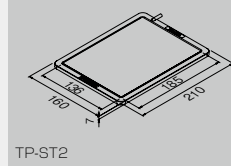

温度設定	ガラス厚	型式
ガラスプレート 室温 ~ 50℃	1.0mm	TP-ST2

適応顕微鏡機種

Discovery.V12/Lumar.V12
 スタンダード

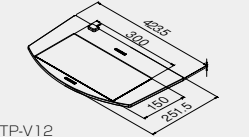


温度設定	ガラス厚	型式
ガラスプレート 室温 ~ 50℃	1.0mm	TP-V12

適応顕微鏡機種

Stemi 2000

(簡易型透過光照明装置: 455137 用)


スタンダード

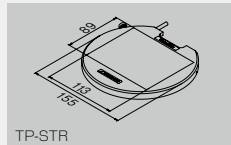

温度設定	ガラス厚	型式
ガラスプレート 室温 ~ 50℃	1.0mm	TP-STR



加温冷却

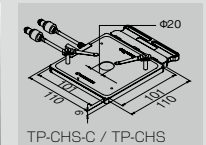

温度設定	型式
金属穴あきプレート 4℃ ~ 60℃	TP-CHS-C (専用チラー付) TP-CHS (保冷ボックス付)

Leica


ライカ専用バージョンがございます。詳しい内容はライカマイクロシステムズ株式会社までお問い合わせください。
 専用バージョン以外、東海ヒット製品は下記をご参照ください。




適応顕微鏡機種

DMI6000B, DMI4000B, DMI3000B 3プレートステージ
 イメージング


加温冷却

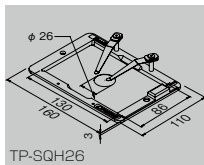

温度設定	型式
金属穴あきプレート 室温 ~ 50℃	TP-SQH26

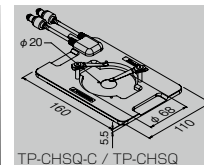

温度設定	型式
金属穴あきプレート 4℃ ~ 60℃	TP-CHSQ-C (専用チラー付) TP-CHSQ (保冷ボックス付)

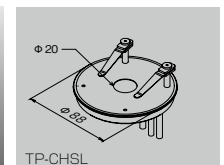スリムステージ用
加温冷却



温度設定	型式
金属穴あきプレート 4℃ ~ 60℃	TP-CHSL-C (専用チラー付) TP-CHSL (保冷ボックス付)




適応顕微鏡機種

DMIL/DMIR 平面メカニカルステージ



加温冷却

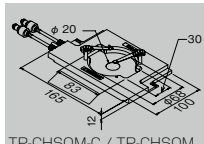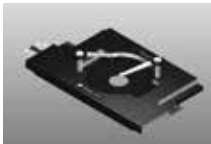

温度設定	型式
金属穴あきプレート 4℃ ~ 60℃	TP-CHSQM-C (専用チラー付) TP-CHSQM (保冷ボックス付)

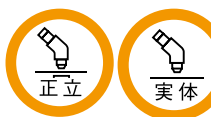


高温

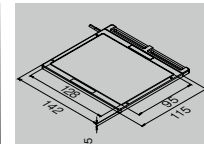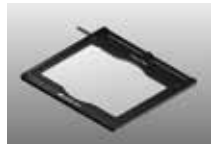

温度設定	ガラス厚	型式
ガラスプレート 室温 ~ 100℃	1.0mm	TP-S-100



加温冷却

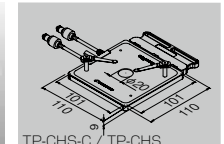


温度設定	型式
ガラスプレート 4℃ ~ 60℃	TP-CHS-C (専用チラー付) TP-CHS (保冷ボックス付)

ユニバーサルタイプ

ユニバーサルタイプ TP-UNI は広い透明な加温面を有し、架台の高さが調整可能なのでさまざまなタイプの実体顕微鏡でお使い頂けます。
ガラス加温ステージの高さは、足の底部分に装着したアジャスターネジで調節できます。

- 架台高の調節可能な範囲：75mm ～ 100mm
- 透明ガラスヒーターのサイズ：W400mm × D175mm
- ガラス厚：1.6mm

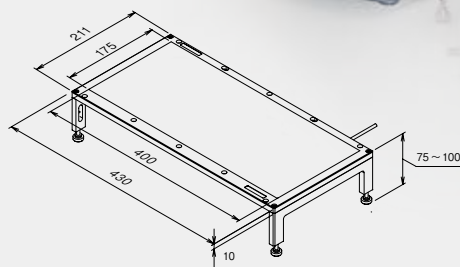


大型タイプ

スタンダード


ガラス厚：1.6mm



プレート外寸：W230 × D180 × H10
ヒートガラス寸法：W180 × D140 × H1.6

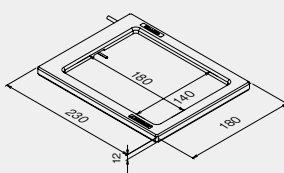

プレート外寸：W300 × D210 × H10
ヒートガラス寸法：W250 × D170 × H1.6

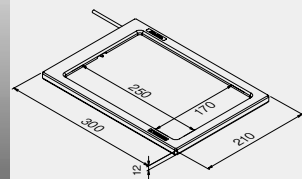

	温度設定	ガラス厚	型式
ガラスプレート	室温 ～ 50℃	1.6mm	TP-W

	温度設定	ガラス厚	型式
ガラスプレート	室温 ～ 50℃	1.6mm	TP-WL



設置イメージ



容器押さえ用板バネ
CL (クレンメル)



温度センサー固定用治具
TSU-G (センサーガイド)

イメージング、加温冷却には CL (クレンメル) 標準付属

(正立顕微鏡用ガラスプレート、実体顕微鏡用には付けられません)

ホットプレート

軽量薄型アルミ製保温プレート。

表面をアルマイト処理した軽量・薄型のヒーターです。安定した表面温度を保ちます。

■温度センサー、専用ソフト TEM には対応していません。

■ TP-SP : W470 × D270 × H12

■ TP-SPE : W270 × D220 × H12

	温度設定	型式
軽量薄型アルミ製保温プレート	室温 ~ 50℃	TP-SP
		TP-SPE




コントローラ寸法: W87mm × D145mm × H75mm

レンズヒーター

簡単装着、大きな保温効果。作動距離の短い対物レンズや油浸・水浸レンズを使用する際、サンプルからの熱が対物レンズへ逃げる事を防止します。

■温度センサー、専用ソフト TEM には対応していません。

温度設定	型式
室温 ~ 45℃	TP-LH

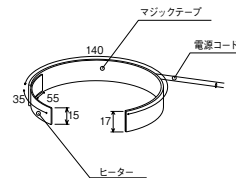

チューブヒーター

ドラム状のヒーターに灌流チューブを巻きつける事により、灌流液を加温いたします。

コンパクト設計及び簡単セッティング。

■温度センサー、専用ソフト TEM には対応していません。

温度設定	型式
室温 ~ 50℃	TP-TH



バイオリサーチ用温度計

細センサーを使用した、精密温度計です。センサーと温度計をセットで構成することにより、精密な温度測定が可能になりました。

テフロン被覆した耐薬品性に優れた細センサーを使用することでセンサーへの熱移動による被測定物の温度低下を抑え、精密な温度測定が可能です。



デジタル温度計

型式: MC1000
(熱電対 K タイプ用)

温度表示を 1℃ / 0.1℃ 単位に切り替えて表示可能。

セット構成

- ・デジタル温度計本体
- ・温度計用プローブ (TSU-200F)



先端幅: 約 2.5mm
先端厚み: 約 0.5mm

温度計用プローブ

型式: TSU-200F
(センサー線タイプ)

直径 1mm の細センサー。
テフロン被覆、高い耐薬品性

酵母・植物等から培養細胞まで、
幅広い観察の用途に対応。

室温付近の温度管理が可能。

通常、室温付近の温度管理は、室温との温度差が少ないためコントロールが難しい
のですが、加温機能と冷却機能を両方持ち合わせているので、加温・冷却の切り替え
スイッチ無しで室温付近の温度コントロールを自動で行うことができます。

20℃付近で培養する線虫、室温付近で培養するショウジョウバエ、ゼ
ブラフィッシュ、他にも培養細胞のように37℃で培養される一般的な
ものでも温度を下げることによって活性化を抑えたり、各温度におい
での発現を観察するのに使用できます。

アプリケーション

37℃ 培養細胞

25℃ ショウジョウバエ、ゼブラフィッシュ

20℃ 線虫

コントローラ

温度調節器と循環水用の
ポンプが内蔵されています。

プレート

冷却素子（ペルチェ素子）と、その熱
をとるための循環水用流路が内蔵され
ています。

冷却恒温槽は、以下「専用チラーユニット」もしくは「保冷ボックス」の
どちらかをお選び下さい。

冷却恒温槽

専用チラーユニット

チラー寸法：
W160mm × D260mm × H180mm

コントローラ寸法：
W160mm × D260mm × H180mm

長時間使用の際に有効です。
コンパクトで水は密閉されているため、設置場所を自由に選べます。

保冷ボックス

保冷ボックス：
W290mm × D218mm × H270mm

コントローラ寸法：
W160mm × D260mm × H180mm

循環水用水槽が設置されているので、凍らせた保冷剤 2 個と水を保冷ボッ
クスに入れて頂き、循環水用水槽を冷やして下さい。
ボックス内の保冷剤がとけてきたら予備の凍らせた保冷剤と交換して下さい。
(交換時期は室温や設定温度にもよりますが、3～4 時間程度を目安として下さい。)

特注

ご使用される用途・条件に合わせて特注対応を請けたまわっております。
お気軽にご相談下さい。


弊社の経験豊富なスタッフ・エンジニアが対応いたします。 TEL:0544-24-6699

実績：年間 100 件以上の特注を製作しています。


■ 特注実績 ■

マウス・IN-VIVO 観察用専用ヒーター


多光子顕微鏡観察中での麻酔中の体温低下防止と
観察部分の温度維持を行います。

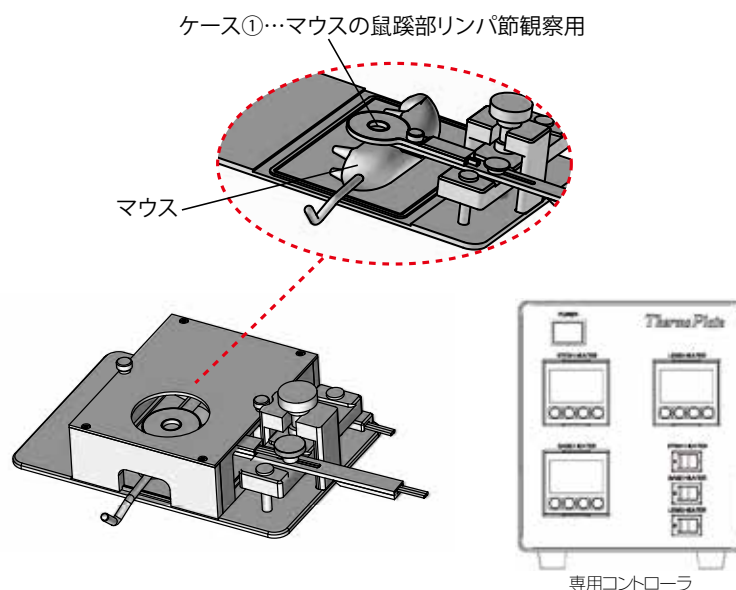

温度勾配プレート

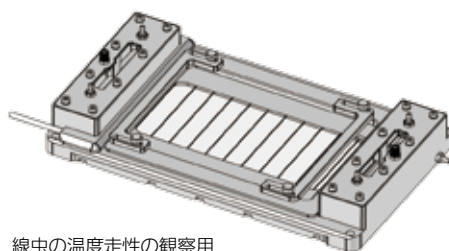


線虫の温度走性の観察用

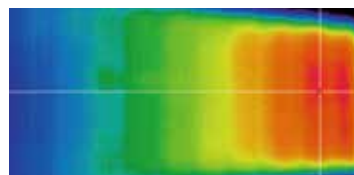

18℃～23℃ の間の直線的な温度勾配が可能。
ガラス+水のため透過観察が可能。

バッテリー式サーモプレート

移動時の保温に有用
バッテリー：3 時間持続

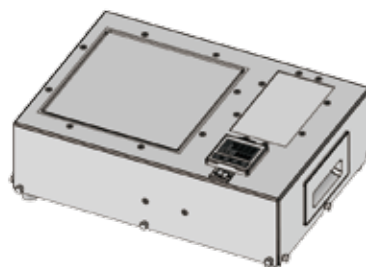

その他、各種容器の固定用ホルダー追加や
特殊な顕微鏡ステージへの取り付けなど実績がございます。



TOKAI HIT



株式会社 東海ヒット

〒418-0074 静岡県富士宮市源道寺町 306-1
Phone 0544-24-6699 Fax 0544-24-6641
E-mail : sales-jp@tokaihit.com

●記載されている商品は、2013.6月現在のものです。●本仕様は予告なく変更される場合があります。また、記載商品は印刷のため、実物とは異なって見える場合があります。

[安全に関するご注意] ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。

●本カタログに掲載されている写真および図等の無断転載複写を禁じます。

TH-QB 1465